


Bitte beachten Sie auch unsere Tutorial-Videos unter [www.clue-medical.com](http://www.clue-medical.com) – die entsprechenden Kapitel sind mit diesem Symbol  gekennzeichnet.



## Aufzeichnung mit Klebelektroden

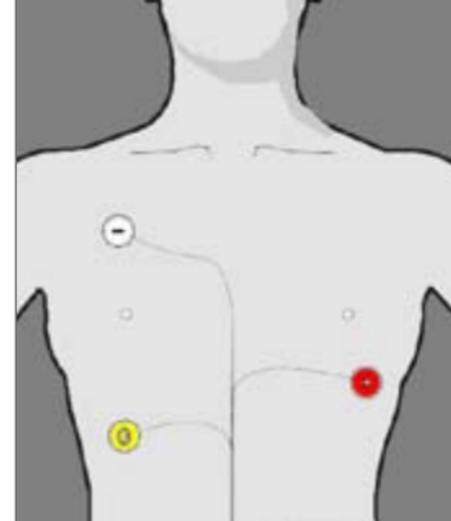

Nach rund 25 bis 27 Std. schaltet das Gerät aus Speicherkapazitätsgründen automatisch ab.

Aufzeichnen von individuellen 2-Minuten-EKG-Abschnitten: Sie können innerhalb der 24-Std.-Aufzeichnung zusätzlich 2-Minuten-EKG-Abschnitte aufzeichnen, indem Sie bei Bedarf kurz die Bedienungstaste drücken, wann immer Sie ein 2-Minuten-EKG aufnehmen wollen.

Es sind dafür keine weiteren Schritte nötig, der 2-Minuten-EKG-Abschnitt wird gespeichert, während die 24-Stunden-Aufzeichnung weiterläuft. Bis zu 10 solcher 2-Minuten-Aufzeichnungen sind möglich.

**Bitte achten Sie darauf, dass keine alten oder nicht frisch aufgeladene AAA Batterien/Akkus in Verwendung sind, falls 24 Stunden lang aufgezeichnet werden soll!**

Der normale Nutzungsmodus von **clue medical 24h** ist unter Einsatz von Klebelektroden. Eine direkte Datenübertragung zum Desktop ist mit **clue medical 24h** nicht möglich.

Um die 24-Std.-Aufzeichnung zu starten, sind vorab die Klebelektroden anzubringen (siehe Gebrauchsanleitung Seite 15). Danach drücken Sie die Bedienungstaste einmal. Nach max. 10 Sek. beginnt die Aufzeichnung und die grüne LED blinkt.

Um die Aufzeichnung zu stoppen, ziehen Sie das Elektrodenkabel einfach aus der **clue medical 24h**-Buchse. Dieser Vorgang ist jederzeit möglich.

## Geräteübersicht / Bedienelemente


- 1 Bedienungstaste
- 2-4 Anzeige-Leuchten
- 5 Infrarot-Fenster
- 6 Anschlussbuchse für Elektrodenkabel



- 7 Batteriefachdeckel mit DIP-Schalter für die Wahl des Übertragungsmodus
- 8 Festelektroden



Vor Inbetriebnahme Batterie-Trennfolie entfernen!

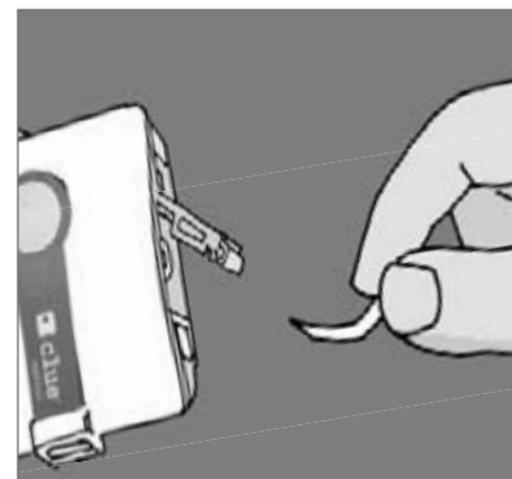

## Zugriff auf Auswertungen im Online Service Center




- Auf der Homepage auf „LOGIN“ klicken.
- Benutzernamen und Passwort eingeben und ggf. Sprache auswählen.
- Es erscheinen die Auswertungen (sowohl die längeren bis zu 24 Std. als auch die evtl. dazwischen aufgenommenen 2-Minuten EKG-Abschnitte) pro freigeschaltetem Gerät.
- Anklicken der gewünschten Auswertung (erste Rubrik, unter #). Unter „EKG Details“ bei „Daten“ auf „**interactive**“ klicken, um die interaktiv wählbare Darstellung der 24-Std.-Aufzeichnung betrachten zu können.

**clue medical 24h** kann über mindestens 24 Stunden RR-Intervalle aufzeichnen und daraus über den gesamten Zeitverlauf folgende Auswertungen generieren, die im Online Service Center grafisch dargestellt und abgerufen werden können.



Diese Informationen enthalten: Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV %), gewichtete Sympathikus/Parasympathikus-Aktivität (FFT-Analyse, MLF) sowie zusätzlich bis zu 10 individuelle 2-Minuten-1-Kanal-EKG-Abschnitte.

Beispiel HRV während Aufzeichnungsdauer in 2-Min.-Intervallen dargestellt

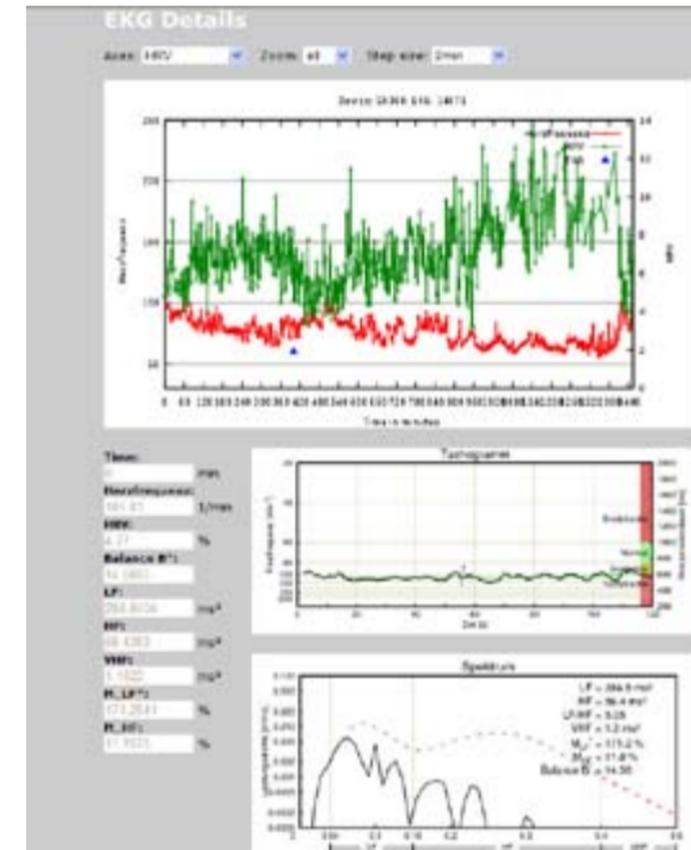


## Übersichten zum Ausdrucken.

Der im angeführten Beispiel mit einem blauen Pfeil markierte 2-Min.-EKG-Abschnitt kann durch Anklicken des PDF-Zeichens neben der Auswertung # wie unten dargestellt aufgerufen werden!

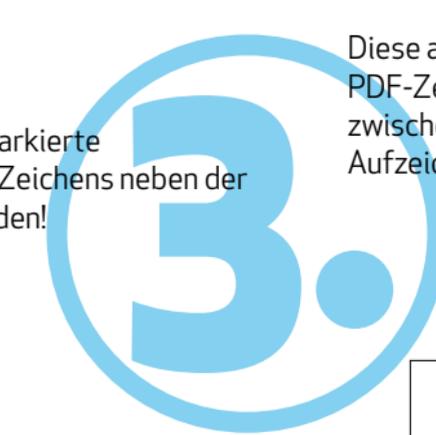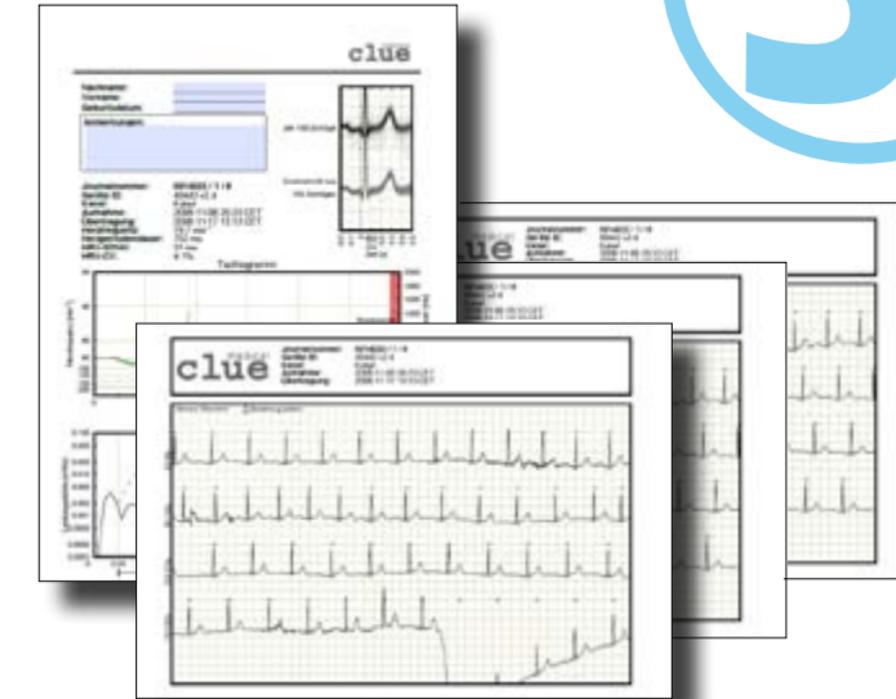

Diese ausdrückbare Darstellung erhalten Sie durch Anklicken des PDF-Zeichens auf der Übersichtsseite „Meine EKGs“ zwischen # und Geräte-ID, aufgeteilt in Stunden, entsprechend der Aufzeichnungsdauer.

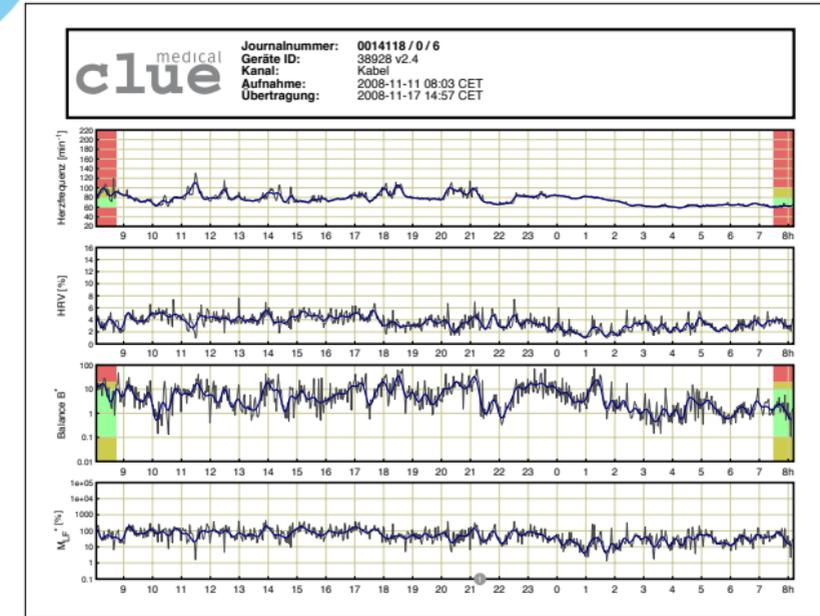

Kurz-Bedienungsanleitung  
clue medical

